


Easy Nano

イージーナノ

研究開発・少量専用ビーズミル
RMBII型

RMB“II”型 進化した 3つのポイント

- 1 周速UP でスケールアップ検討がスムーズに
- 2 処理速度 1.5倍～3倍UP
- 3 ベッセル温度監視、電力量モニタリングが可能に

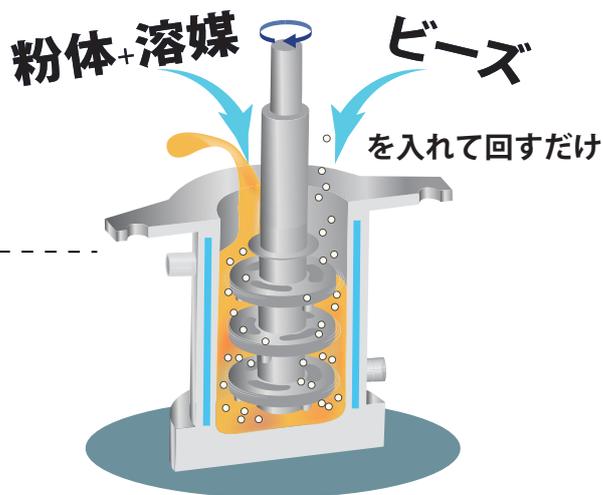

少量処理

ベッセルセット
交換により
30mL～400mL
の処理が可能

連続式ビーズミルのス
ケールアップも可能

時間短縮

ベッセルセット
分解・交換 **30秒**
準備～洗浄作業も容易

最高周速 **12 m/s**
のパワフル運転で、
処理効率大幅アップ

省スペース・ メンテナンス フリー

A3用紙 ×1枚
の設置面積

シンプルな構造のため
日常点検が**必要なし**

条件を選ばない

φ2.0mm 以下
であればビーズ径に制限
がありません。

管理も簡単
(処理時間＝滞留時間運転)

◆ レンタルできます

当機種は、お気軽にすぐに貸出が可能です。
初めての方には、営業員が操作説明にお伺いします。

六角レンチのみで組立・分解可能



A.MEX

豊富なオプション

一般的なオプション

- ・半密閉蓋
- ・密閉蓋

- ・攪拌羽根

- ・動力負荷モニターリング
- ・タイマー制御



処理量 1.3 倍



プレミキシングで濡れ性UP



タイマーで自動停止

安全対策

- ・安全カバーインターロック
- ・非常停止ボタン
- ・防爆対応可能




カバーが開いているときは電源が入りません。



モーターには耐圧防爆構造、計器や非常停止スイッチには本質安全防爆構造が採用されています。

連続循環 EC-05 型


連続ユニットによるポンプ循環処理

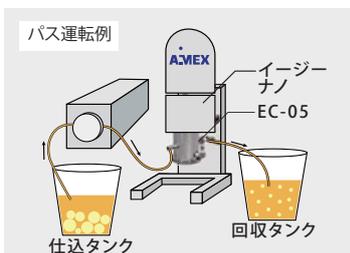

イージーナノに装着するだけで連続循環運転が可能です。

ビーズ分離 VPF-08 型

加圧／減圧兼用

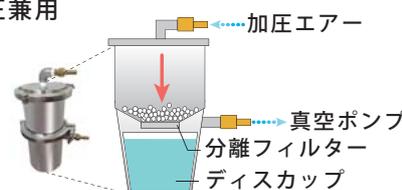

分離フィルターにより、スラリーとビーズを簡単に分けることができます

※真空ポンプを内蔵した BFU 型もあります

仕様一覧

電源：AC100V / モーター：0.75kW / 最高回転数：5730rpm / 対応ビーズ径：φ0.03 ~ 2.0mm

ベッセルラインナップ

型式	01	02	04	08
呼び容量	100mL~	200mL~	400mL~	800mL~
標準仕込量	30mL~	60mL~	100mL~	300mL~
接液部材質	ジルコニア、窒化珪素、ウレタン、SUS、ガラス（ベッセルのみ）など			
備考	冷却ジャケット付きのため温度コントロール可 各サイズ簡易密閉蓋の装着が可能です。 上記のベッセルは、イージーナノ多筒式、防爆仕様でも使用可能です。			

イージーナノ多筒式

最適なビーズ径、濃度、分散媒、分散剤、分散剤濃度等の検討に有力です。



TSG-6U

ベッセル（容器）が4個または6個装着でき、同時に運転できるモデルです。
TSG型…同回転で複数バッチ運転できます。
LSG型…各バッチ個別駆動で運転されます。

イージーナノと同様の手軽さのまま同時に複数水準の処理が可能

アイメックス株式会社 <https://www.aimex-apema.co.jp/>

東京営業部

〒340-0831 埼玉県八潮市南後谷62番地
TEL:048-930-6140 FAX:048-930-6150 E-MAIL:tokyoseller@aimex-apema.co.jp

大阪営業所

〒564-0052 大阪府吹田市広芝町4番地1号 江坂ミタカビル503
TEL:06-6338-6551 FAX:06-6338-6212 E-MAIL:osakaseller@aimex-apema.co.jp